

# エアキュット EP1600

足用

## 取扱説明書




- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。


# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

 **注意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

## 絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)



❗ 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

お読みになった後は、  
お使いになる方がいつでも見られるところに  
必ず保管してください。

## 警告



必ず守る

● 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。

- (1) 心臓に障害のある人
  - (2) ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人
  - (3) 悪性腫瘍のある人
  - (4) 妊娠中や生理中の人
  - (5) かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
  - (6) 骨の弱い人(骨粗しょう症など)
  - (7) 安静を必要とする人
  - (8) 熱の高い人(38℃以上)
  - (9) 重度の血行障害のある人
- 守らないと事故や体調不良の原因になります。



禁止

● マッサージ以外の目的で使用しない。  
事故やけがの原因になります。

● 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。  
発火や感電の原因になります。

## 警告



禁止

- 電源コードや電源プラグがこわれたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電やショート・発火・故障の原因になります。
- 本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。  
事故や感電の原因になります。



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用する。  
交流100V以外で使用すると発火や感電の原因になります。
- 変圧器による使用は避ける。  
事故や感電の原因になります。
- 動かない場合や異常を感じたときは使用を中止し、  
すぐに電源プラグを抜いて点検修理を依頼する。  
そのまま使用すると発火や感電の原因になります。



分解禁止

- 絶対に改造しない。また、修理技術者以外の人  
は分解したり、修理しない。  
発火や感電・けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店またはお近くの松下電工  
お客様ご相談窓口にご相談ください

## 注意



必ず守る

- 使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは  
直ちに使用を中止し、医師に相談する。  
事故や体調不良を起こすおそれがあります。
- 幼児やお子様、また自分で操作のできない人に  
使わせない。  
事故やけがの原因になります。



禁止

- 足以外には使用しない。  
けがの原因になります。



必ず守る

- マッサージは1回15分以内にする。  
長時間の連続使用は逆効果やけがの原因になります。

## ⚠️ 注意



水場使用  
禁止

- 浴室など湿気の多い場所で使わない。  
感電や故障の原因になります。



禁止

- 電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分などを  
付着させない。  
感電やショート・発火・故障の原因になります。



電源プラグ  
を抜く

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
また、ぬれた手で抜き差ししない。  
感電ややけどの原因になります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 電源コードを抜くときは電源コードを持たず、必ず  
電源プラグを持って引き抜く。  
感電やショート・発火の原因になります。

## もくじ

### 安全上のご注意

2

### 準備

8

- 各部のなまえ ..... 8
- 足用アタッチメントの装着 ..... 10

### 使いかた

12

- 電源を入れてマッサージする ..... 12

### 使用後は

14

- 使い終わったら ..... 14
- お手入れと保管 ..... 15

### お知らせ

16


- Q & A ..... 16
- 別売品のご案内 ..... 16
- 故障かな？と思ったとき ..... 17
- 保証とアフターサービス ..... 18

ゆったりとした  
姿勢でご使用  
ください



# 各部のなまえ


## 本体

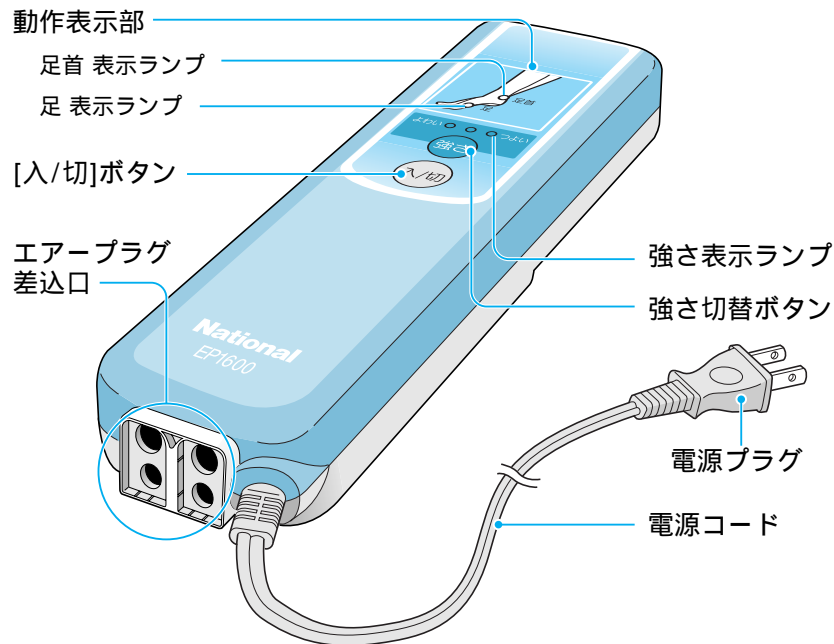

### ⚠ 警告

- 医師の治療を受けている人や、心臓障害のある人、ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器を使用している人、悪性腫瘍のある人、妊娠中や生理中の人、かつて治療を受けたところや疾患部へ使用する人、骨の弱い人（骨粗しょう症など）、安静を必要とする人、熱の高い人（38 以上）、重度の血行障害のある人、その他特に身体に異常を感じている人は、医師と相談のうえ使用する。事故や体調不良の原因になります。

## 足用アタッチメント( 2 個 ) 左右共通です

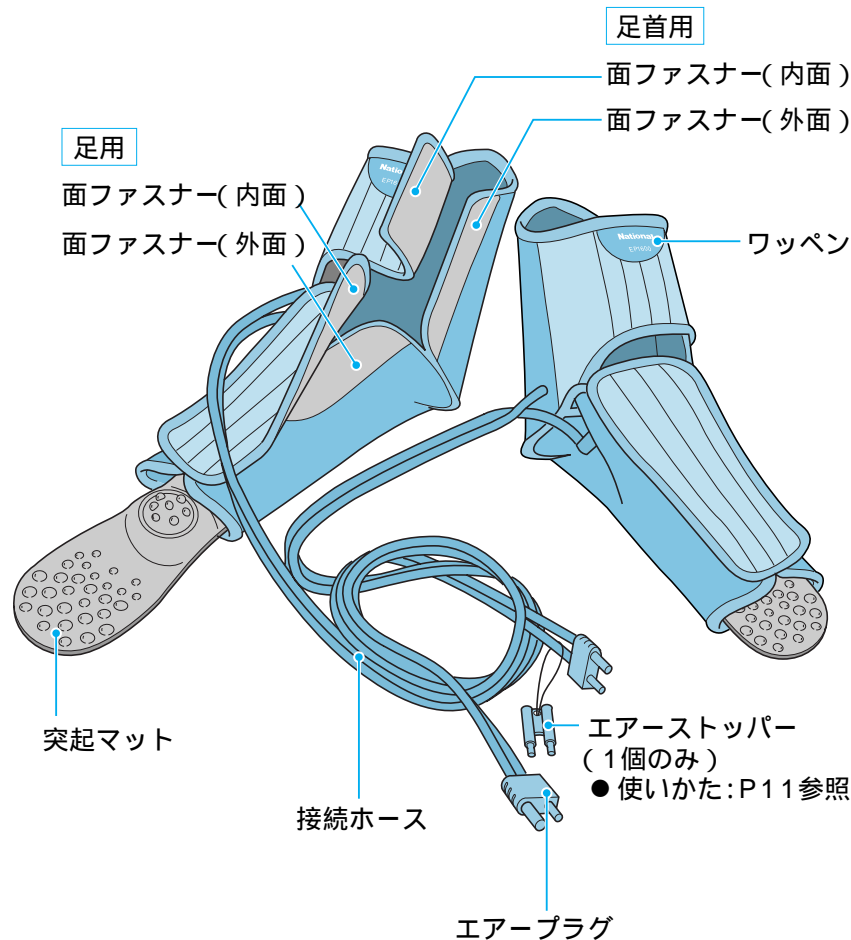

### 1 「足」に装着する


- かかとをアタッチメントのかかと部分に合わせる。
- お好みに応じて突起マットを敷く。(必ず足裏部にお使いください)

### 2 足用 面ファスナーで固定する

- スtockingをはいている場合は面ファスナー(外面)に付かないように気を付けてください。

### 3 足首用 面ファスナーで固定する

- アタッチメントを装着した状態で歩かない。

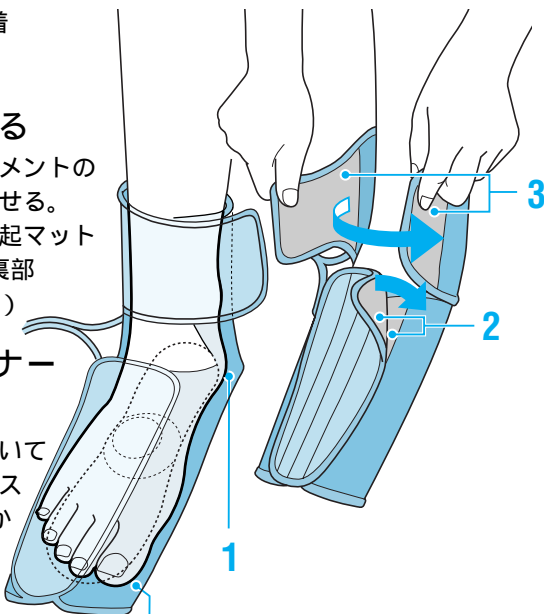

図は中の様子を解説するための透視図です。

#### ⚠ 警告


- ペースメーカーを装着の方は絶対使用しない。誤動作の原因になります。
- マッサージ以外の目的で使用しない。事故やけがの原因になります。

#### ⚠ 注意

- 足以外には使用しない。けがの原因になります。


### 4 エアープラグを本体に差し込む

- 穴の大きさに合わせて縦にカチッと音がするまで差し込む。
- ホースを踏んだり、上に重い物を載せたりしない。

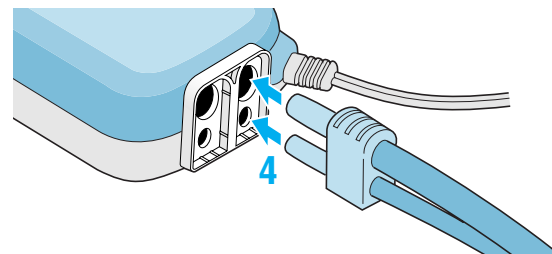

#### 片足のみ使用の場合(片足のみのご使用もできます)

- エアーストッパーの付いたアタッチメントを使用する
- エアープラグを本体に差し込んだ後、残りのエアープラグ差込口にエアーストッパーを差し込む(左右どちらでもかまいません)
- 2人で片足ずつ使用しない。

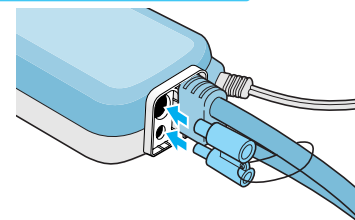

#### ⚠ 警告

- 本体を布団やコタツの中に入れて使用しない。事故や感電の原因になります。

#### ⚠ 注意

- 幼児やお子様、また自分で操作できない人に使わせない。事故やけがの原因になります。
- 浴室など湿気の多い場所で使わない。感電や故障の原因になります。






# 使い終わったら


必ず電源「切」の状態で行ってください。

## 1 電源プラグを抜く

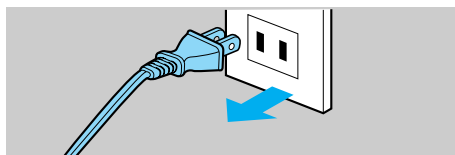


## 2 アタッチメントを重ねる

- ① アタッチメントを丸め、かかと部分で折り曲げる
  - ② アタッチメントを重ねる
  - ③ ホースを巻く
- ホースが折り曲がらないように注意する。

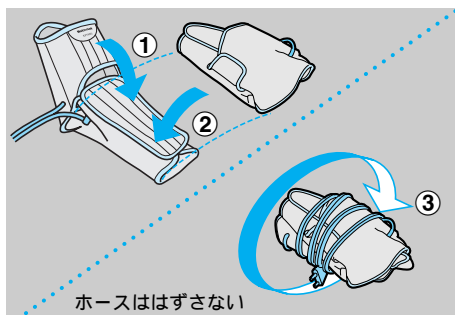

## 3 箱に収納する

- 箱は収納時にもご利用ください。
- 電源コードは本体に巻かない。

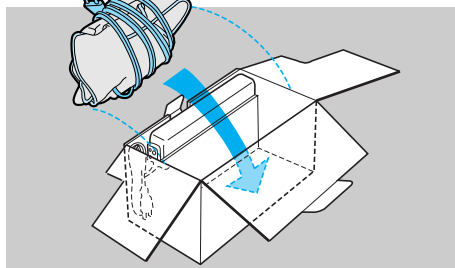

### △注意

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く。感電やショート・発火の原因になります。

# お手入れと保管

必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。


## お手入れは...



本体・アタッチメントの汚れは、石ケン液を含ませた布でふく

- シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しない。
- プラグ差込口に異物を入れない。

## 保管は...

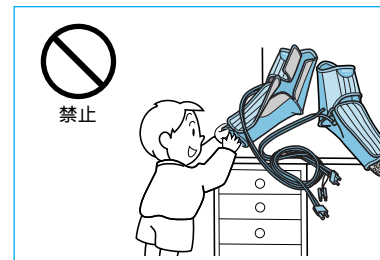

小さな子供の手の届く所に置かない

- 本体を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたりしない。
- 温度・湿度の高い所や直射日光のあたる所に置かない。
- 足用アタッチメントに、針やピン等を刺さない、また鋭利なものをあてない。

### アタッチメントを紛失されたとき

最寄りの販売店にてお問い合わせください。  
(ご注文品番) EP0160 (標準価格) 9000円 (2個入り・税別)

### △注意

- 電源プラグや機器のすき間にピンやゴミ、水分などを付着させない。感電やショート・発火・故障の原因になります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。感電ややけどの原因になります。




# Q&A

エアーマッサージについてQ&Aでお答えします。

## Q1 「Wエアームミ」って何ですか？

- 空気ならではのやさしい感触で、足 足首の順に加圧・排気をくり返す方式です。

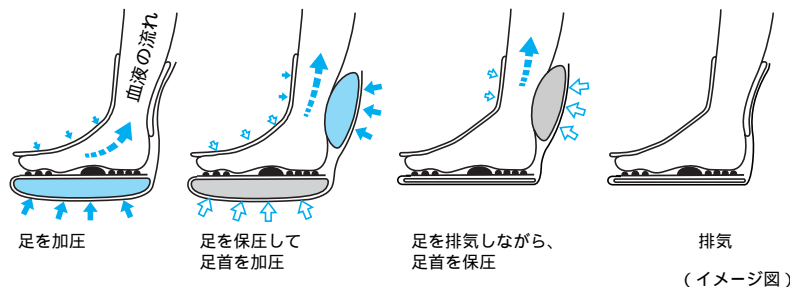


(イメージ図)

## Q2 なぜ「使ってはいけないとき」があるの？

- 発熱時：特に原因不明時は重大な病気かもしれません。
- 生理中：周期を乱したり、体調を崩す原因になります。
- 妊娠中、産後：ホルモンのバランスが崩れています。
- 高血圧、重度の血行障害の人：血管に大きな負担となります。

以上のような場合は必ず医師と相談してください。

別売品のご案内 下記のアタッチメントも取り揃えております。

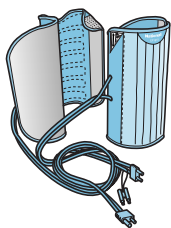

<ふくらはぎ用アタッチメント>

品番 EP0161(2個入り) 標準価格9000円(税別)

- むくんだふくらはぎの血行促進に効果的です。足用との同時使用はしないでください。

# 故障かな？と思ったとき

下記の点検をお願いします。

こんなとき	原因と処置
● 動かない	▶ ● 電源プラグが抜けていませんか？
● 表示ランプが点灯しない	▶ ● コードが断線していませんか？
● 「つよい」にしても圧力が弱い	▶ ● 足用アタッチメントがしっかり固定されていますか？
● 強さ表示ランプが3つとも点滅	▶ ● 接続ホースに物を載せていませんか？
	▶ ● エアープラグが抜けていませんか？

上記の「原因と処置」での点検後、なお異常がある場合は使用を中止し、事故防止のため、必ず販売店に修理を依頼してください。

## ⚠ 警告

- 絶対に改造しない。また、修理技術者以外の人とは分解したり、修理しない。発火や感電・けがの原因になります。

## 定格・仕様

使用電源	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	7W
エアースピード	15～40秒/1サイクル(片足使用時は10～20秒/1サイクル)
圧力	133、213、293hPa
安全装置	「入/切」ボタン切り後3秒で67hPa以下に減圧
タイマー	約15分
医療用具許可番号	25BZ0062
型式認可番号	▽ 91-58346
寸法	本体 たて235×よこ64×高さ40 (mm)
	足用アタッチメント たて260×よこ90×高さ180 (mm) / ホース長さ100cm
質量	本体 約425g
	足用アタッチメント 約215g (1個)
定格時間	連続
アタッチメント対応寸法	足寸法 約22cm～28cm

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのナショナルエアーマッサーの補修用性能部品を製造打ちり後最低5年間保有しております。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の17頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は  
お買い上げの販売店まで保証書をそえて製品をご持参ください。  
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点は  
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

## 愛情点検

## 長年ご使用のマッサーの点検をぜひ！



このようなことはありませんか？

- ・コードやプラグが異常に熱い。
- ・作動中に異常な音、振動がする。
- ・本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し、プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部

〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地 TEL.(0749) 26-7890

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

## 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

持込

# ナショナル エアーマッサージャー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EP1600		
保証期間	本体	お買い上げ日より 1カ年	
お買い上げ日	平成	年	月 日
お客様様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電 話 (       )		
販売店	住所・店名 _____		
	電話 (       )		

松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部  
〒522 - 8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)23 - 151(代表)

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡してください。